

## ユニ・チャーム 超立体マスク ウイルスガード N95

N95（米国規格 42 CFR Part84）合格品

警告	このマスクは有害性のある粒子状物質からの防護に有用ですが、 病気や感染症にかかるリスクを完全に回避することはできません。 使用方法を誤ると病気または死に至る可能性があります。 ご使用前に必ず、取扱説明書を読み、監督者の指示に従ってください。
----	---

### 【使用範囲】

本品は、口と鼻を覆うように顔に取り付けることにより、環境空気中の有害な粒子状物質の呼吸器からの吸入を抑えるものです。

本品は医療現場での使用を目的としたマスクであり、溶接作業等の一般産業用途の粉塵作業用ではありません。

本品は CDC（米国厚生省疾病管理・予防センター）の「医療施設における結核菌感染対策ガイドライン」に適合しており、結核菌の院内感染対策用としての防護マスクとして有用です。また、電気メス、レーザーメスによる手術及びその他の医療機器により発生する微粒子状物質（0.1 マイクロメートル以上）に対する呼吸用保護具としても有用です。

また、本品は MIL-M-36954C（JIS L 1912）による BFE（バクテリア捕集効率）試験において、BFE99.9%以上の性能を有するフィルタを使用しています。

ただし、有害なガス・蒸気・オイルミストが発生している場所及び酸素濃度が不明もしくは 19.5%以下の環境下における作業では使用できません。

また、有害物質の種類、濃度や酸素濃度が不明な場合も使用しないでください。


### 特別もしくは重要なユーザーの指示

このマスク AG-B01 は承認番号 TC-84A-5039 で認可され、日本バイリーン株式会社が製造し、ユニ・チャーム株式会社が販売しています。


### 【使用上の注意】

1. 着用前にマスクに異常（本体の変形・破損、ノーズフィットの接着不良、ノーズクッションの不良、本体内部の汚れ、ラバーバンドの弾性が不足したり、ラバーバンド留め具が立っている等）がないことを確認してください。異常がある場合は良品と交換してください。
2. ラバーバンド留め具の部分の周りが裂けていたり、穴が開いていた場合は不良品と考えられます。
3. ヒゲを生やしたまま使用しないでください。ヒゲによりマスクと顔との間にすきまが生じ、防塵性能が低下します。
4. 装着方法に必ず従って着用してください。装着方法を誤ると、もれが生じ、体を害する危険があります。事前に装着方法の訓練を行ってから使用してください。また、着用時にもれがないことを必ず確認してください。
5. マスクと顔の間に、タオル等を当てて使用しないでください。もれが生じます。
6. マスクの着脱は有害な微粒子状物質が発生している場所では行わないでください。
7. 使用時にマスクに異常があったり、血液または体液等の飛沫がしみ込んだり、作業に支障をきたすような息苦しさを感じたときは新品と交換してください。
8. マスクを洗濯しないでください。防護性能の低下及び変形によるもれが生じます。
9. 感染症の院内感染防護具(PPE)として使用する場合は、手袋、ゴーグル等のほかの保護具の着用、病室の陰圧化等の設備的対策を講じた上で使用してください。
10. 本品を改造しないでください。改造すると密着性が損なわれ、もれが生じます。
11. 一度使用したマスクは再使用しないでください。
12. 体調がすぐれない場合は医師に相談してください。

### 【構造】

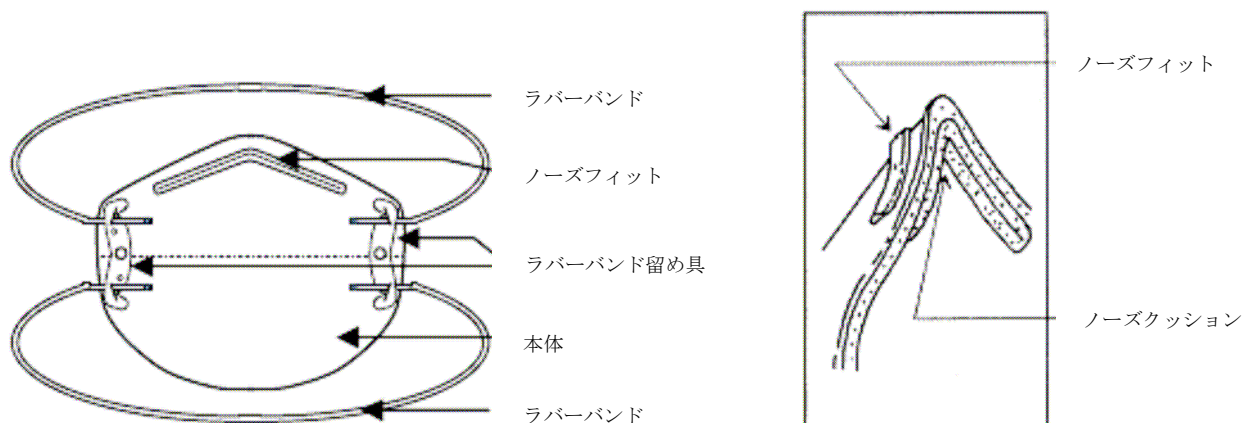

### 【装着方法】

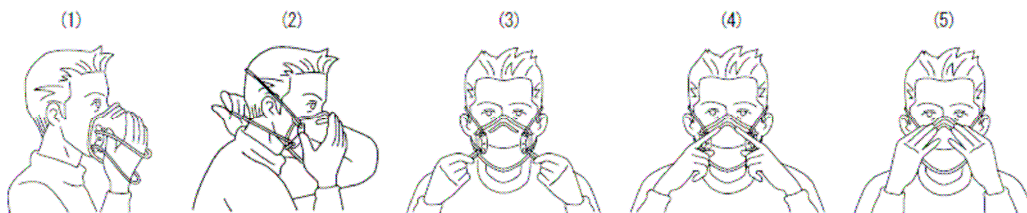

- (1) ノーズフィット部分を上側にし、2本のラバーバンドの下に手を入れてマスクを顔にあてます。
- (2) 片手でマスクをおさえながら、上側のラバーバンドを後頭部にかけ、次に下側のラバーバンドを首の後ろに回します。
- (3) 下側のラバーバンドの両端を引っ張り、長さを調整した後、同様に上側のラバーバンドの長さを調整します。
- (4) ノーズフィットを鼻の形に合わせてフィットさせます。
- (5) 装着が完了したら、顔への密着度合いを確認します。まず、両手でマスク全体を覆って息を吐いてください。マスクと顔の間から息が漏れている時は、ノーズフィットとラバーバンドを調節し顔に密着させてください。正しく密着させることができない場合は、ご使用をしないでください。

### 【保管方法】

未使用のマスクは、乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。


### 【廃棄方法】

マスクに付着した有害物が再飛散ないように袋等に詰めて、適切な廃棄処理をしてください。

そのまま廃棄すると有害物を吸引する恐れがあります。また、感染症の病原体を捕集しているおそれがある場合、有害物質として処理しなければいけません。


【性能】

項目	社内規格値
粒子捕集効率	97.0%以上
吸気抵抗値	50 P a 以下（毎分 40 リットル）、105 P a 以下（毎分 85 リットル）
排気抵抗値	50 P a 以下（毎分 40 リットル）、105 P a 以下（毎分 85 リットル）



**Unicharm Corporation**

Sumitomo Fudosan Mita Twin Bldg. West Wing,  
3-5-27, Mita, Minato-ku, Tokyo, 108-8575 Japan  
TEL : +81-3-6722-1083



**THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS :**

TC-	Protection <sup>1</sup>	Respirator		Cautions and Limitations <sup>2</sup>
		AG-W01	AG-B01	
84A-5039	N95	X	X	ABCMNOPS

**1. PROTECTION**

**N95- Particulate Filter** (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restriction may apply.

**2. CAUTIONS AND LIMITATIONS**

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
- S - Special or critical User's Instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning.